

Club UL

Letto ultra-low

I letti "ultra-low" sono un'ottima soluzione per le persone affette da demenza, disorientate o che rischiano di cadere dal letto a causa di un limitato controllo del corpo durante il sonno. Club UL è il letto ideale che aiuta a minimizzare questo rischio, grazie alla possibilità di abbassarlo fino a pochi centimetri da terra. Facilita i trasferimenti e favorisce l'indipendenza, migliorando la qualità della vita.



VERMEIREN
we care for you

Club Ultra Low (UL)


Una serie di letti che deriva da oltre 65 anni di esperienza nelle soluzioni di assistenza domiciliare. Il letto Club UL di **VERMEIREN** è progettato in base alle indicazioni degli utenti e degli operatori sanitari. Un modello a quattro sezioni semplice e sicuro, per offrire il miglior comfort e cura a domicilio.

Regola elettricamente il letto Club UL grazie ai tre motori Linak™. L'altezza può essere modificata in base alle esigenze dell'utente o dell'assistente, per facilitare le cure o i trasferimenti.

La posizione Anti-Trendelenburg è inclusa di serie, per apportare ulteriori benefici quando necessario.



Il telecomando è facile da usare, sia per l'assistente che per l'utente e può essere bloccato, per una maggiore sicurezza.

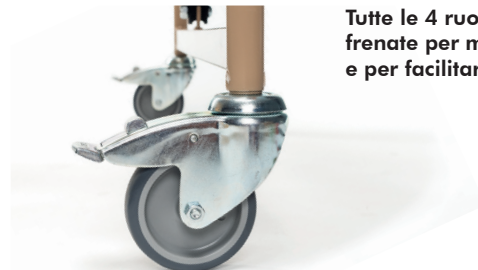

Tutte le 4 ruote possono essere frenate per maggiore sicurezza e per facilitare i trasferimenti.

Sollevamalati

Nella gamma **VERMEIREN** sono disponibili sollevatori compatibili con i nostri letti **ultra-low**. Un solleva malati è un dispositivo che aiuta a trasferire i pazienti da un luogo a un altro, ad esempio da un letto ad una carrozzina o da una carrozzina ad un wc. Club UL può essere abbassato al livello del pavimento o sollevato ad un'altezza comoda per il paziente e l'assistente.



Per garantirti il miglior comfort, il letto Club UL è stato progettato con molte opzioni di configurazione. Dalla rete a doghe ai rivestimenti di finitura.

SCOPRI DI PIÙ sulle caratteristiche del letto Club UL qui di seguito.

Rete a doghe



Doghe in metallo




Doghe in legno

Cremagliera opzionale



Senza cremagliera

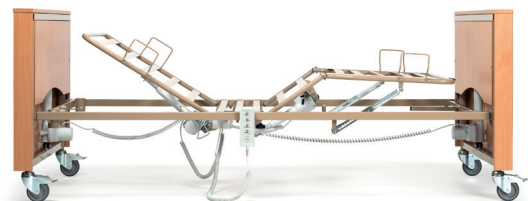

Con cremagliera

Sponde laterali



Sponde laterali alzate per garantire comfort e sicurezza



Abbassa le sponde laterali per facilitare gli spostamenti o la cura del paziente

Benefici di un letto ultra-low

Può prevenire o ridurre l'impatto delle cadute per i pazienti che rischiano di cadere dal letto. Ad esempio, chi soffre di demenza, morbo di Parkinson, epilessia o altre condizioni che causano disorientamento o possibilità di caduta.

- Può migliorare l'autonomia e il comfort dei pazienti, facilitandone gli spostamenti.
- Può migliorare la sicurezza e l'efficienza degli operatori sanitari riducendo lo sforzo fisico e il carico di lavoro legati al sollevamento e al trasferimento dei pazienti.




Optionals

Abbiamo selezionato gli optional migliori per il letto **Club UL**. Scopriili qui.



La barra sollevamalati garantisce ulteriore indipendenza al paziente per sollevarsi o cambiare posizione.

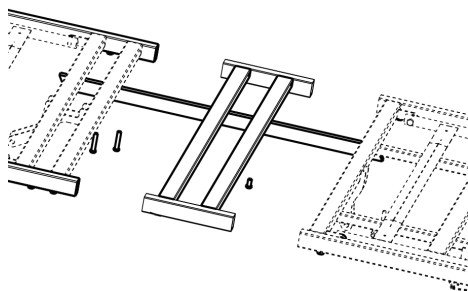

I letti Club sono pensati per soddisfare le esigenze di tutti! Allunga la rete di 20 cm facilmente, grazie alla possibilità di estensione della rete.



Asta portaflebo



Kit di trasporto

Le configurazioni possono variare a seconda del Paese. Si prega di consultare le schede d'ordine per avere le informazioni più aggiornate.

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Stiamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Club UL** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Dati tecnici

■ Larghezza	1037 mm
■ Lunghezza	2175 mm
■ Altezza (senza asta sollevamalati)	725 - 1135 mm
■ Base regolabile in altezza	215 - 625 mm
■ Materasso	RG 35, 120 mm spessore, 2000x900 mm
■ Anti-Trendelenburg	sì

■ Regolazione massima del montante superiore gambe/piedi	20,7°
■ Regolazione massima del montante inferiore gambe/piedi	-16,5°
■ Regolazione massima dello schienale	69°
■ Peso	73,5 kg
■ Peso massimo dell'utente	165 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it

Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

