

TURIOS

La nostra compatta





*Scansiona questo codice QR
e scopri il video relativo alla Turios.*




■ La più compatta

Turios è la nostra carrozzina elettrica più compatta. Le sue ridotte dimensioni garantiscono una facile manovrabilità, rendendola particolarmente adatta per l'uso in ambienti interni. Prendere i mezzi pubblici o utilizzare un ascensore non sarà affatto un problema con questa carrozzina elettrica.

Le prestazioni della Turios sono eccellenti anche se utilizzata all'esterno. Con le sue grandi ruote, la Turios è adatta per superare piccoli ostacoli mantenendo sempre una stabilità ottimale.

Turios, la tua miglior compagna di viaggio, per interni ed esterni!

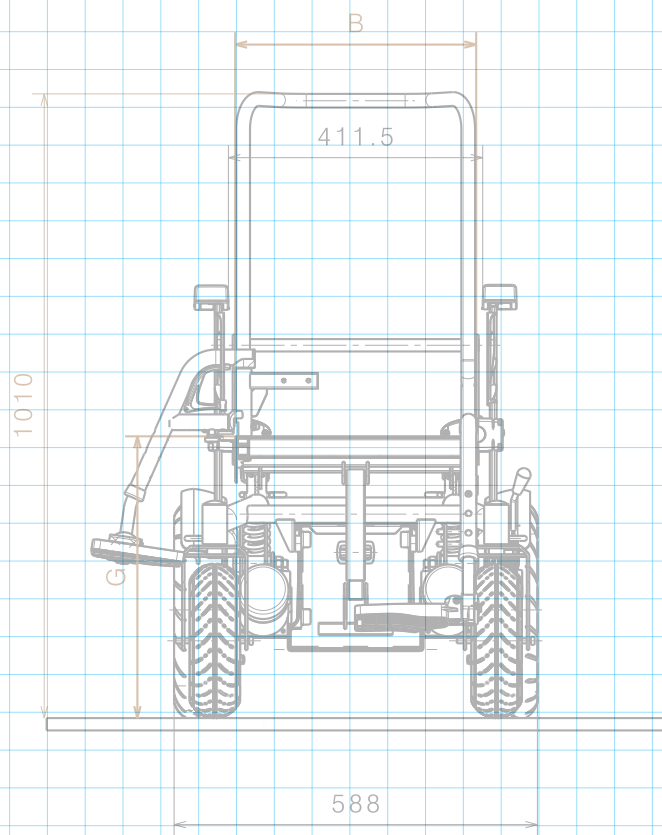

■ Personalizza la tua Turios

Configura la tua Turios in base al tuo stile di vita e ai tuoi gusti! In spazi chiusi o all'esterno, la tua Turios si adatta a qualsiasi situazione. Il cerchione sarà sempre in linea con il colore del telaio che hai selezionato durante l'ordine.

Ruote anteriori



8" (200 mm)



9" (230 mm)



10" (260 mm)

Ruote posteriori



■ Configura la tua Turios

Il comfort è una caratteristica molto importante in una carrozzina, motivo per cui avrai diverse scelte di sedili e schienali quando ordinerai la tua Turios. Per un migliore posizionamento e una postura più stabile possiamo consigliare uno schienale o un cuscino preformato con finitura PU Soft Touch o in elegante ecopelle.



*Turios C5 nero - Appoggiatesta L55
Luci a LED SE19 - Pedane comfort BZ8*

Schienale e sedile preformati L34 L35 PU Soft Touch

Tipologie di rivestimento




3D Net




Pelle artificiale



Nylon Plus

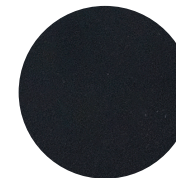

PU Soft Touch

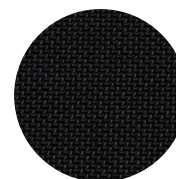

Nylon

Tipologie di schienale




*Schienale in nylon
tensionabile con
straps in velcro*



*Schienale preformato
fissato al telaio con
morsetti in alluminio*

Per favorire una postura maggiormente confortevole, la Turios è dotata di regolazione manuale di sedile e schienale o, su richiesta, regolabili elettricamente (opzionali), offrendo sia comfort che facilità d'uso.



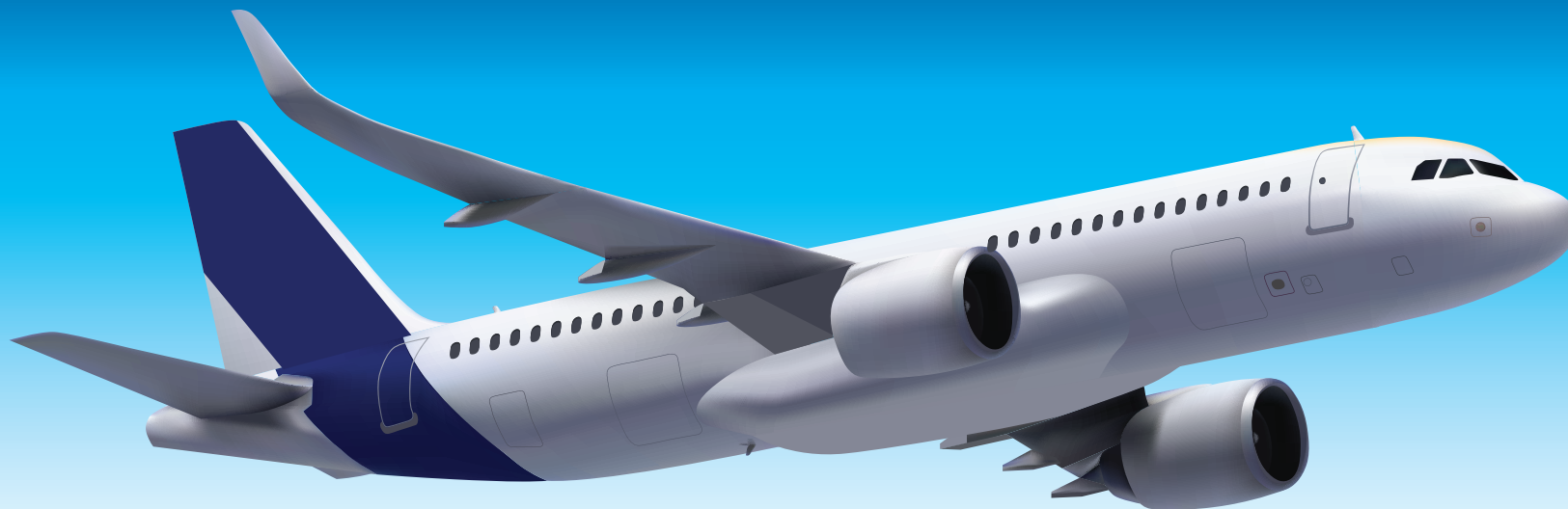

■ Stai pianificando un viaggio? Porta con te la tua Turios!



Le batterie della Turios possono essere trasportate in aereo, così che tu possa portare la Turios con te in viaggio.



La Turios è stata sottoposta al crash test secondo la norma **ISO 7176-19** e può essere posizionata all'interno di veicoli a motore, previo fissaggio dedicato, per bambini e adulti con peso uguale o superiore a 22 kg.

■ Colori


La Turios è disponibile in più di 7 diversi colori. Il colore scelto verrà applicato sul telaio inferiore e anche sui cerchi delle ruote posteriori.



C4
rosso



C5
nero

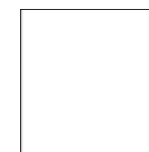

C76
bianco metallizzato



C77
nero metallizzato



C79
blu brillante
metallizzato



C85
verde



C87
arancione



Altri colori
su richiesta



SE09 - Comando accompagnatore



SE06 - Porta USB



B31 - Porta stampelle



SE19 - Luci



BZE - Pedane elevabili elettriche



SE27 - Bauletto

Un elenco completo di tutte le opzioni
possibili è disponibile sul sito Web
www.vermeiren.it

LiNX™

LiNX, Il comando della carrozzina di nuova generazione

- Un sistema continuo ed espandibile
- Componenti modulari: combinare e abbinare i moduli
- Tecnologia all'avanguardia
- Approccio rivoluzionario alla programmazione



Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 / 610 / 640 mm
■ Lunghezza totale	1060 - 1070 mm
■ Altezza sedile	490 - 520 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
■ Profondità sedile	430 - 510 mm
■ Altezza schienale	550 o 585 mm

■ Batterie	2x12V/38Ah/150W o 2x12V/50Ah/450W
■ Velocità	6 km/h o 10 km/h
■ Autonomia	>25 km
■ Peso	105,8 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	 

Per le dimensioni in mm, peso in kg sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).

Le misure possono variare in base alla configurazione della carrozzina.

Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

TURIOS

La nostra compatta

- design compatto
- uso interno ed esterno
- potente trazione posteriore
- eccezionale comfort di guida

distribuito da:

VERMEIREN
we care for you

